

B&B DENTAL GUIDED SURGERY SOFTWARE



Il nuovo software per la chirurgia guidata B & B Dental GS ti consentirà di progettare e finalizzare i casi in modo indipendente, rapido, intuitivo e preciso. Grazie a questo software sarà possibile creare la mascherina chirurgica adattandola alle esigenze di tutti i casi clinici. Il software può essere scaricato gratuitamente dal sito Web di B & B Dental ed è ottimizzato per Windows e iOS. L'interfaccia è interattiva e semplice da utilizzare con risultati prevedibili e affidabili.

KIT, STRUMENTI e SERVIZI

B & B Dental ha progettato e realizzato un kit di strumenti appositamente concepito per ottimizzare l'esecuzione di procedure di chirurgia guidata, che comprende non solo una serie completa di frese, ma anche speciali dispositivi di montaggio per l'inserimento dell'impianto.



B & B Dental offre un servizio per la pianificazione e il posizionamento degli impianti e può fornire le guide solo inviando i file stl e dicom del caso da trattare.

RIGENERAZIONE OSSEA

Una linea completa di materiali di rigenerazione ossea di origine animale (bovina) da utilizzare sia insieme agli impianti che per ripristinare i volumi dei tessuti.



T-BARRIER MEMBRANE IN COLLAGENE

Le membrane T-barrier in collagene sono in collagene equino eterologo di tipo 1 e sono indicate per procedure di rigenerazione tissutale guidata per velocizzare la guarigione.



NOVOBONE® GRANULES

Osso spongioso e/o corticale di origine bovina privo di collagene osseo e deproteinizzato totalmente a freddo in grani. Pratico e sicuro da utilizzare in siti post estrattivi o per stabilizzare impianti e ristabilire profili ossei più armoniosi.

COMING SOON

CONTATTI

SEDE LEGALE:
Via S. Benedetto, 1837
40018 S. Pietro in Casale (BO) Italy

SEDE OPERATIVA:
Via Due Ponti, 19
40050 Argelato (BO) Italy
Tel. +39 (0) 51.81.13.75
Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it
www.bebdental.it



OUR PRO DUCTS



B. & B. Dental S.r.l. è una società italiana leader nel campo dell'implantologia orale specializzata nella progettazione di impianti dentali e materiali per la rigenerazione ossea. Grazie all'esperienza acquisita in quasi 30 anni è riuscita a sviluppare tecnologie implanto-protesiche e materiali innovativi di alto livello qualitativo.

L'impresa è stata fondata nel 1992 dal Dott. Claudio Banzi ed ha la propria sede alle porte di Bologna. Nello stesso anno viene depositato il primo brevetto per l'impianto dentale denominato DURA-VIT, ideato dallo stesso fondatore dell'azienda e poco dopo è stato ottenuto il brevetto di NOVOCOR, materiale di rigenerazione ossea.

La gamma di offerta di B. & B. Dental è CONCEPTA DA CHIRURGHI ODONTOIATRI PER CHIRURGHI ODONTOIATRI spalleggiati da ingegneri esperti in implantologia e l'innovazione è assolutamente uno degli obiettivi fondamentali che viene perseguito.


Nel 2007 la sua équipe di ingegneri mette a punto una nuova connessione CONEXA con lo scopo di diminuire lo svitamento delle viti protesiche e la colonizzazione batterica a livello del colletto dell'impianto.

Nasce così la seconda generazione d'impianti DURA-VIT INN. Dal 2010 è stata messa in produzione la terza generazione di impianti 3P, WIDE e ø 3 (in seguito ridenominati "SLIM", disponibili anche con ø 3.4), in cui è stata introdotta la spira a triplo filetto che permette di ridurre considerevolmente il tempo di inserimento e il trapasso dell'osso, qualsiasi densità esso presenti. Successivamente sono stati concepiti gli impianti EV, che si differenziano per avere una doppia spira di profondità aumentata per una migliore stabilità primaria, soprattutto in osso spugnoso.



CONNESSIONE PROTESICA UNICA

I componenti B & B Dental sono compatibili con tutti i diametri delle linee di impianti 3P, EV, WIDE e PTERYGO, infatti grazie alla speciale e unica connessione con diametro interno di 3 mm, qualsiasi moncone o pilastro scelto può essere inserito nell'impianto, indipendentemente dal diametro di quest'ultimo.

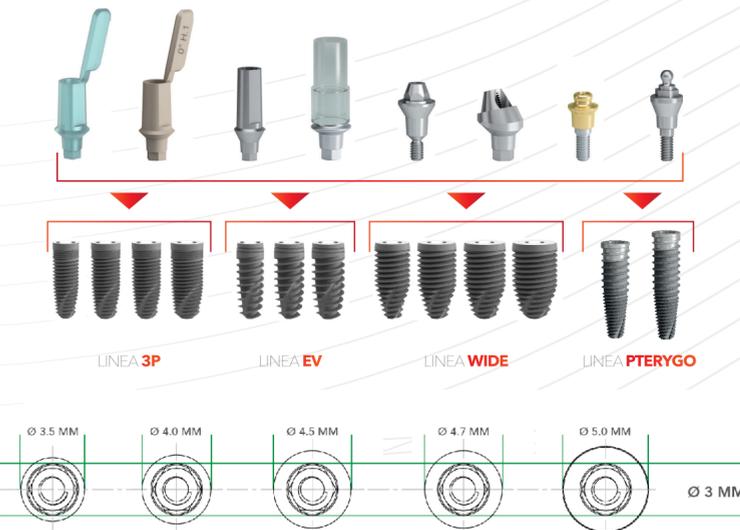

SISTEMA DI SBLOCCAGGIO CONEXA

Le chiavi estraibili (INN-6161 e INN-6161L) permettono di sbloccare il legame meccanico di "saldatura a freddo" tra impianto e moncone data dall'effetto Cone-Morse.



UN'AMPIA GAMMA DI LINEE IMPLANTARI



MINI LINE

Ø 2,0 - Ø 2,4 - Ø 2,5 mm
Impianti monoblocco a diametro ridotto per stabilizzare protesi

WIDE LINE

Ø 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 mm
Una linea di diametro maggiore per i siti di post estrattivi

PTERYGO LINE

Ø 4,7 mm
La linea soluzione per le atrofie del mascellare

SLIM LINE

Ø 3,0 - Ø 3,4
La linea a diametro ridotto per siti con minore disponibilità d'osso

EV LINE

Ø 4,0 - Ø 4,5 - Ø 5,0 mm
La linea con spira aggressiva per l'osso spugnoso e la massima stabilità

3P LINE

Ø 3,5 - Ø 4,0 - Ø 4,5 - Ø 5,0 mm
La linea con spira morbida adatta a siti posti vicino al seno mascellare e in osso compatto

UN UNICO KIT PER IMPIANTI DURA-VIT EV/3P/SLIM



scopri lo anche nella versione **semplificata**



FRESE COUNTERSINK

Per migliorare l'inserzione in caso di osso duro

Kit dura-vit completo



COMPATTATORI ESPANSORI

Strumenti utili in caso di osso duro per migliorare la stabilità implantare primaria durante la preparazione dell'osteotomia



FRESE DLC

Per assicurare una capacità di taglio sempre ottimale e una detersione facilitata



STOP DI PROFONDITÀ


Gli stop garantiscono di preparare facilmente e precisamente la profondità del sito implantare.

KIT DURA-VIT PER IL RIALZO DEL SENO MASCELLARE



Il kit DURA-VIT SINUS LIFT permette di effettuare un rialzo di seno mascellare tramite l'uso dei Compattatori-Espansori e gli Stop di profondità di altezze differenti.

Calibrando l'altezza ed il diametro degli strumenti all'interno del kit, sarà possibile sollevare la membrana di Schneider per poi posizionare materiale di rigenerazione ossea o semplicemente un impianto in tutta sicurezza e comodità per il paziente minimizzando i rischi di danneggiamento o rottura della membrana stessa.

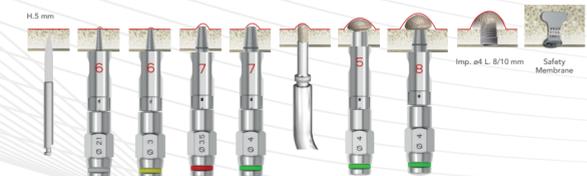

KIT DURA-VIT PTERYGO



La linea Pterygo di B&B Dental è stata ideata per un'agevole inserzione per donare al clinico una soluzione ai casi in cui l'atrofia del mascellare non permetta l'inserimento degli impianti convenzionali e nei quali sia necessario evitare o limitare le procedure di rialzo del seno mascellare e di innesto osseo o i cantilever posteriori.

La linea Pterygo B&B Dental è provvista di frese (per chirurgia convenzionale e guidata), chiavi e componenti che ne permettono un'inserzione, utilizzo ed una funzionalizzazione ottimali. Il kit DURA-VIT PTERYGO è stato pensato per permettere una facile inserzione e un protocollo chirurgico sicuro.